



# GLOBUS

## RADIOFREQUENCE



*Manuel de l'utilisateur*

**RF** BEAUTY **MINI**



CE



## CHER CLIENT

**NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CHOIX ET NOUS SOMMES A VOTRE ENTIÈRE  
DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU AIDE**

Les appareils pour la radiofréquence "Rf Mini Beauty" sont produits par

### **"Deess"**

3/F, BuildingA GoldenPower Innovation and Technology Park,  
Liuxian 2 road, Xin'an street, Bao'an district, Shenzhen,  
Guangdong, China, 518101  
Tél : +86-755-23832052/88322271 [www.mydess.com](http://www.mydess.com)

et distribués par :

### **Domino S.r.l.**

Via Vittorio Veneto, 52  
31013 Codognè (Treviso) ITALY  
Tél 0438.7933 Fax 0438.793363  
[info@globuscorporation.com](mailto:info@globuscorporation.com)  
[www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)

## INDEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	5
Dispositif .....	5
DOTATION .....	5
DESTINATION D'EMPLOI .....	6
CONNEXIONS .....	6
Dispositif .....	6
ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES .....	7
Dispositif .....	7
Interface et commandes .....	8
Écran .....	8
PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS .....	9
Comportement obligatoire .....	9
Avertissement avant l'utilisation .....	9
Avertissement pour l'utilisation .....	9
Effets indésirables .....	9
Contre-indications .....	10
ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....	10
Dispositif et accessoires .....	10
Transport .....	11
Élimination .....	11
MODE D'EMPLOI .....	11

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dispositif

Fréquence :	1.15+0.1MHz
Degré de protection :	IP 20
Dimension :	15,5 x 5,5 x 2,5 cm
Poids :	500 g
Puissance :	24 W
Modalité :	résistive

### Conditions d'usage

Température :	de +5°C à +40°C
Humidité relative maximale :	80%
Pression atmosphérique :	de 860 hPa à 1060 hPa

### Alimentateur

Modèle : KSAS0451200300D5

INPUT : 100-240 V~ 50/60 Hz 1,2A

OUTPUT : 12V = 3.0A

Polarité: 

**Gel pour la radiofréquence :** Globus, 250 ml

## DOTATION



A- Mallette de transport

B- Alimentateur

C- Dispositif

1 bouteille de gel conducteur

Après avoir ouvert le paquet, assurez-vous que l'équipement de base est complet. Si quelques éléments manquent, contactez immédiatement le détaillant autorisé où vous vous êtes adressés pour l'achat.

Contrôlez l'intégrité de l'appareil et des accessoires.

Les images sont à titre démonstratif seulement. Le producteur se réserve de pouvoir modifier toutes les informations fournies sans préavis.

## DESTINATION D'EMPLOI

La durée de vie de ce dispositif est de 5 ans. On conseille le retour du produit chez le fabricant et/ou un centre autorisé chaque 2 ans pour l'entretien et la vérification de la sécurité.

Les dispositifs Rf beauty mini ont été étudiés pour être utilisés dans des milieux comme :

- milieux domestiques ;
- pour l'utilisation esthétique personnelle opportunément informés des méthodes utilisées par l'appareil.

## CONNEXIONS








### Dispositif

Le dispositif "Rf beauty mini" fonctionne branché au réseau électrique. Pour relier l'alimentateur au connecteur branchez la prise comme représenté dans l'image (ci-dessous).

**Branchez tout d'abord le connecteur au dispositif, puis le connecter au réseau électrique.**




## ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES

	<p>Symbole RAEE (Déchets d'appareils électriques et électroniques). Symbole de recyclage.</p> <p>Le symbole RAEE utilisé pour ce produit indique que ce dernier ne peut pas être traité comme déchet domestique. La correcte élimination de ce produit contribuera à protéger l'environnement. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, adressez-vous au bureau compétent de votre collectivité locale, à la société chargée de l'élimination des ordures domestiques ou au magasin où le produit a été acheté.</p>
	<p>Indique que le dispositif est de classe II</p>
	<p>Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu'il est en conformité avec les conditions requises des directives en vigueur</p>
	<p>Indique que le produit est réalisé dans le respect de la directive 2011/65/UE</p>
	<p>Le symbole indique que la lecture du présent manuel est obligatoire avant d'utiliser le dispositif.</p>
	<p>On fait allusion au fabricant</p>
	<p>Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu'il est en conformité avec les conditions requises des normes en vigueur</p>


## Dispositif



## Interface et commandes

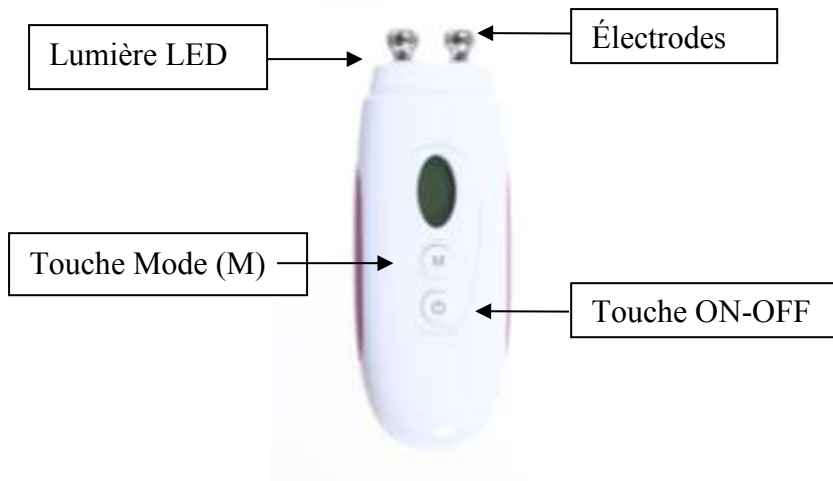

## Écran

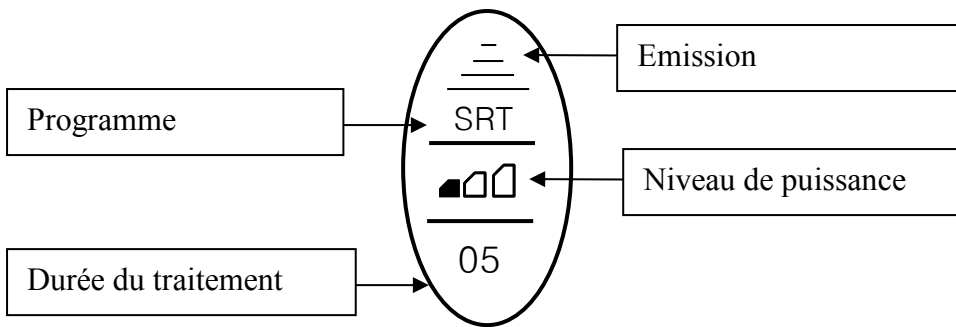



## **PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS**

### **Comportement obligatoire**

Pour maintenir le niveau maximum de sécurité, l'utilisateur doit utiliser l'appareil dans le respect des prescriptions et des limites d'utilisation du manuel d'emploi.

Le producteur décline toute responsabilité à propos d'une utilisation différente de ce qui est indiqué et prescrit dans le présent manuel.

Sans l'autorisation écrite du producteur est interdite la reproduction même partielle sous n'importe quelle forme et par n'importe quel moyen électronique ou mécanique de textes et/ou de photos contenus dans ce manuel.

Si l'emballage, le câble ou le connecteur de l'alimentation présentent des signes d'usure ou d'endommagement il faut s'occuper du remplacement immédiat du même.

L'appareil doit être relié à la ligne électrique à travers son alimentation, avant d'exécuter cette opération veuillez vérifier que l'installation soit conforme aux directives en vigueur dans son pays. Ne pas placer l'alimentation de manière qu'elle résulte difficile de la déconnecter de la prise d'alimentation.

Aucune modification de l'appareil n'est admise.

### **Avertissement avant l'utilisation**

Nous ne recommandons pas l'utilisation de l'appareil en même temps avec d'autres appareils électroniques, en particulier avec ceux qui sont utilisés pour le maintien des fonctions vitales. En cas de nécessité d'une utilisation conjointe d'autres appareils veuillez observer le bon fonctionnement.

- Il est conseillé de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'unité ; conservez soigneusement le présent manuel.
- Avant chaque utilisation, contrôlez toujours l'intégrité de l'appareil, condition indispensable pour l'exécution du traitement ; n'utilisez pas l'unité si elle présente des défauts ou des dysfonctionnements des câbles ou des touches.
- Ne pas utiliser des produits inflammables lors de l'application du dispositif.
  
- Le dispositif ne doit pas être laissé à la portée des enfants.

### **Avertissement pour l'utilisation**

Lorsque vous utilisez RF Beauty mini assurez-vous de :

- enlever les lentilles de contact ;
- toujours utiliser le gel conducteur, ne pas utiliser sur la peau sèche ;
- ajuster la puissance d'émission en fonction de la tolérance individuelle à la chaleur.

### **Effets indésirables**

- Rougeur

- Irritation cutanée

### **Contre-indications**

L'utilisation de l'appareil est contre-indiquée :

- chez les patients porteurs de pacemaker et d'autres dispositifs électroniques implantables ;
- ne pas traiter les yeux ;
- ne pas réaliser en présence de troubles du système cardio-vasculaire, de la thyroïde et de la peau ;
- ne pas effectuer au cours de la grossesse ;
- ne pas réaliser en présence de cancer de la peau ou de glaucome ;
- ne pas réaliser au cours des traitements médicamenteux hormonaux ;
- ne pas effectuer sur les peaux qui ont subi de graves brûlures ou des cicatrices hypertrophiques.

Éviter absolument d'effectuer des traitements sur des surfaces insensibles à la chaleur et en présence d'une des maladies suivantes :

- hémorragies ;
- infections locales ou systémiques ;
- pathologies dermatologiques actives ;
- fièvre ;
- altération de la coagulation ;
- maladies inflammatoires aiguës.

Si des injections de fillers (botox, acide hyaluronique, etc.) avaient été effectuées, il est recommandé d'utiliser l'appareil sur les zones concernées seulement après une période de 3-6 mois.

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

### **Dispositif et accessoires**

- En cas de dommage réel ou présumé ne pas ouvrir le dispositif ou ne pas tenter par soi-même de le réparer.

Ne pas intervenir sur la machine et ne pas l'ouvrir. Les réparations peuvent être effectuées seulement par un centre spécialisé et autorisé.

- Éviter des chocs violents qui pourraient endommager l'appareil et en déterminer un mal-fonctionnement même non immédiatement vérifiable.
- Le dispositif doit être utilisé dans un milieu sec et libre en air (pas enveloppé par d'autres objets).
- Nettoyer le dispositif et les accessoires seulement avec un désinfectant ou des sels d'ammonium quaternaire dilués en eau distillée avec un pourcentage de 0,2-0,3%. Assurez-vous d'enlever tout reste de crème de la plaque et des électrodes mobiles. A la fin du nettoyage/désinfection, le dispositif et ses accessoires doivent être parfaitement essuyés avec l'utilisation d'un chiffon propre.

- Utiliser le dispositif et les accessoires toujours avec les mains convenablement propres.
- On recommande d'utiliser le dispositif dans un milieu propre, afin d'éviter la contamination du même dispositif et des accessoires avec de la poussière et de la saleté.
- On recommande d'utiliser le dispositif dans un milieu aéré, où il y a une fréquente ventilation.
- Il est conseillé de nettoyer/désinfecter les électrodes après chaque usage, sauf indication contraire. Concernant les autres parties qui pourraient entrer en contact avec la personne traitée il est recommandé de les nettoyer si nécessaire et au moins une fois par semaine.
- Le produit et ses accessoires, lorsque vous ne les utilisez pas et/ou en cas de transport doivent être conservés dans leur emballage d'origine.

## Transport

Après utilisation ou pendant le transport, l'appareil et ses accessoires sont stockés à l'intérieur de la mallette et disposés comme à l'origine.

## Élimination


Ne pas jeter l'appareil ou ses parties sur le feu, mais éliminer le produit dans les centres spécialisés et de toute façon dans le respect des législations en vigueur dans votre pays. On informe l'utilisateur qu'il peut rendre le produit à la fin du cycle de vie au distributeur à l'acte d'achat d'un nouveau appareillage.

## MODE D'EMPLOI

### Allumage/Eteignement du dispositif

- Branchez le connecteur de l'alimentation dans l'emplacement prévu.
- Appuyez pendant quelques secondes le bouton ON-OFF. L'écran s'allume et un bip confirme l'allumage réussi.

Pour éteindre l'appareil maintenez appuyé sur le bouton ON-OFF.

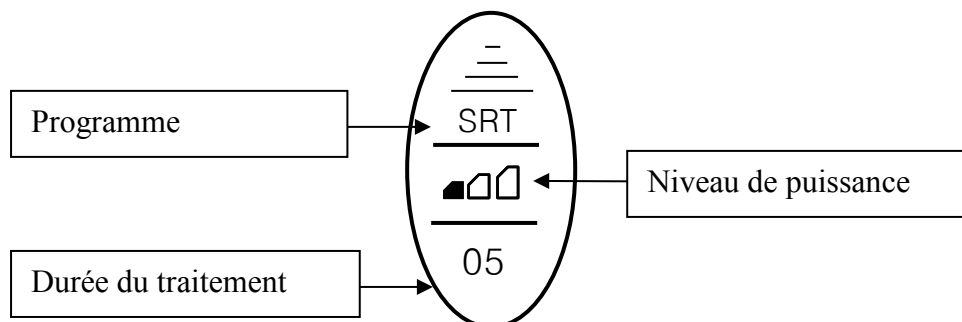

Appuyez et maintenez le bouton Mode (M) pressé, vous pouvez sélectionner l'un des trois menus :

- programme
- niveau de puissance
- durée du traitement

Après avoir sélectionné le menu, vous pouvez modifier la sélection en appuyant rapidement sur le bouton Mode (M).

Pour **choisir un programme**, donc, vous devrez appuyer longtemps sur le bouton Mode (M) jusqu'à ce que SRT soit sélectionné, puis à travers des pressions plus rapides du même bouton vous pouvez choisir parmi les programmes suivants :

Programme	Technologie
SRT (rajeunissement de la peau et autour des yeux)	Radiofréquence
WR (atténuation des rides)	Radiofréquence + lumière rouge
SR (rajeunissement)	Radiofréquence + lumière jaune

Pour **régler la puissance d'émission** vous devrez appuyer longtemps sur le bouton M jusqu'à ce que le graphique du niveau de puissance soit sélectionné.

Vous pouvez définir le niveau d'énergie souhaité par des pressions plus courtes sur le même bouton. Nous vous recommandons de commencer avec le niveau 1, puis éventuellement augmenter.

Pour **régler la durée du traitement** vous devrez appuyer longtemps sur le bouton M pour sélectionner la durée du traitement. Faire des pressions plus courtes pour définir un temps différent (5, 10 ou 15 minutes).

Après avoir choisi les paramètres démarrez le programme en appuyant brièvement sur le bouton ON-OFF. L'indicateur d'émission commence à travailler et allume la lumière LED (programmes WR et SR).

Appuyez brièvement sur le bouton ON-OFF pour mettre en pause l'appareil.

### Conseils d'utilisation









Un traitement sur l'ensemble du visage (y compris les pommettes, le contour des yeux, le front et le cou) peut exiger entre 15 et 25 minutes :

- Enlever le maquillage et laver la peau du visage et du cou - 5 minutes
- Sécher bien la peau et appliquer le gel pour le traitement - 1 minute
- Effectuer le traitement souhaité pendant une durée totale comprise entre 5 et 15 minutes
- Nettoyer la peau et appliquer une crème hydratante - 3 minutes

**Important : appliquer une quantité généreuse de gel avant d'effectuer le traitement et réappliquer si nécessaire pendant le traitement. Afin d'éviter les brûlures, ne jamais utiliser Globus RF Beauty Mini sans le gel.**

### Comment effectuer le traitement étape par étape

Faire glisser lentement les têtes de Globus RF Beauty Mini sur la peau. Vous pourriez ressentir une sensation de chaleur en profondeur. Plus le mouvement des têtes sur la peau sera lent, plus la chaleur se fera sentir. Assurez-vous que les deux têtes sont toujours en contact étroit avec la peau tout au long du traitement. Pendant la durée de l'ensemble du traitement continuez à déplacer les têtes sur la peau en utilisant des mouvements circulaires sur le visage.

	1) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de la partie supérieure de la clavicule à la partie inférieure de la mandibule (éviter la thyroïde).
	2) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de la mâchoire inférieure jusqu'à la pommette.
	3) Faites glisser Globus RF Beauty Mini du coin de la bouche à la pommette.
	4) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de la lèvre supérieure à la pommette.
	5) Faites glisser Globus RF Beauty Mini du coin du nez à la fin de la pommette (éviter les tempes).
<p>(SR) Rajeunissement de la peau autour des yeux : 10 minutes. Important : pour la zone autour des yeux utilisez uniquement le programme SR car il est le seul à ne pas émettre de lumière.</p>	
	1) Faites glisser Globus RF Beauty Mini à partir du coin interne de l'œil vers l'extérieur et ensuite jusqu'à l'arcade sourcilière (éviter le globe oculaire et la paupière).
	2) Faites glisser Globus RF Beauty Mini de l'extérieur de la paupière à la racine des cheveux devant le sourcil.
	3) Faites glisser Globus RF Beauty Mini vers le haut et vers le bas plusieurs fois entre le sourcil et la racine des cheveux.

## CONDITIONS DE GARANTIE

L'appareil est garanti au premier utilisateur pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat contre les défauts de matériels ou de fabrication, pourvu que l'appareil soit utilisé de façon appropriée et maintenu dans les conditions normales d'efficacité.

La garantie est limitée dans les cas suivants :

- six (6) mois pour les accessoires fournis comme, par exemple, les alimentateurs ;
- pas de garantie pour les accessoires et les matériaux considérés comme "de consommation" comme, par exemple, le gel.

Cette garantie est valable dans le pays où le produit a été acheté. Si le produit a été acheté dans un Pays de l'Union Européenne, la garantie est valable dans tous les États membres.

Pour bénéficier du service de garantie, l'utilisateur doit respecter les clauses de garantie suivantes :

1. Les produits devront être consignés pour la réparation dans les emballages originaux aux frais du client.
2. La garantie est subordonnée à la présentation d'un document fiscal (ticket ou facture), indiquant la date d'achat du produit.
3. La réparation n'aura aucun effet sur la date originale d'échéance de la garantie et n'aboutira pas au renouvellement ou l'extension de la même.
4. Lors de la réparation, si aucun défaut n'est détecté, les frais relatifs à la vérification technique seront de toute façon facturés à l'utilisateur.
5. La garantie n'est pas valable si le dommage est déterminé par : des chocs, des chutes, l'utilisation impropre du produit, l'utilisation d'une alimentateur/chargeur de batterie non original, des évènements accidentels, des altérations du produit, remplacement/décollement des sceaux de garantie et/ou la falsification du produit. En outre, la garantie ne couvre pas les dommages causés durant le transport ou par l'utilisation d'emballages non originaux.
6. La garantie ne couvre pas l'impossibilité d'utilisation du produit, d'autres coûts accidentels ou d'autres dépenses soutenues par l'acheteur.

Les dimensions, les caractéristiques et les photographies contenues dans ce manuel ne sont pas contraignantes. Le producteur se réserve le droit d'apporter toutes modifications nécessaires sans préavis.



**DOMINO S.R.L.** - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

***[www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)***