

GYMBODY *plus*

Powered by:

SLENDERTONE®

ENGLISH

Quick Start Guide

FRANÇAIS

Guide de Démarrage Rapide

DEUTSCH

Kurzanleitung

UK: 0845 070 77 77

Rep. of Ireland: 1890 92 33 88


France: 0810 347 450

info@slendertone.com

www.slendertone.com

Contents

Contenu
Inhalt

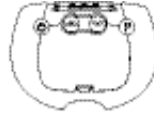

Unit - Apparail
Gerät




Belt - Ceinture - Gürtel



Batteries - Piles
Batterien



Pads - Electrodes
Elektroden

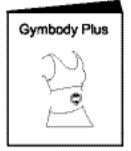


Instruction Manual
Mode d'Emploi
Bedienungsanleitung

© 2006. Bio-Medical Research Ltd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.
Part No.: 2490-9801 - Rev.: 1 - Issue date: 5/06


1 Insert Batteries

Insérez les piles
Einlegen der Batterien

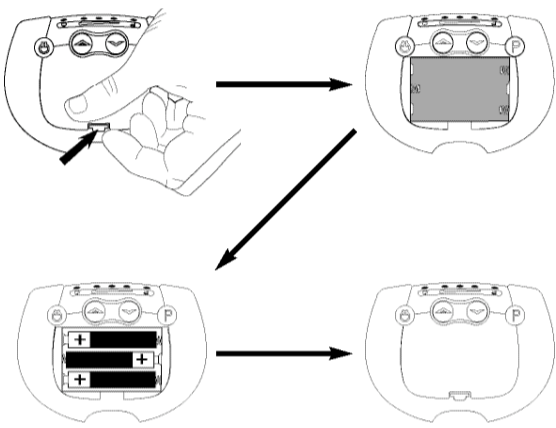

2 Attach Unit

Attachez l'unité
Das Gerät anbringen

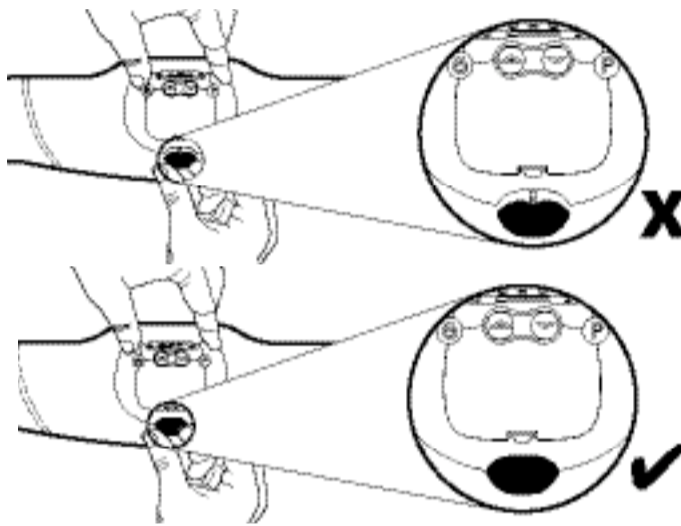


Insert **FULLY**. - Insérer **COMPLETEMENT** - **VOLLSTÄNDIG** einschieben.

3 Peel Off Covers

Retirez les caches


Entfernen Sie den Schutz

Remove the cover from the patterned side of the pads.
Retirez le cache qui protège la face à dessin des électrodes.
Entfernen Sie den Schutz von der gemusterten Seiten der Pads.

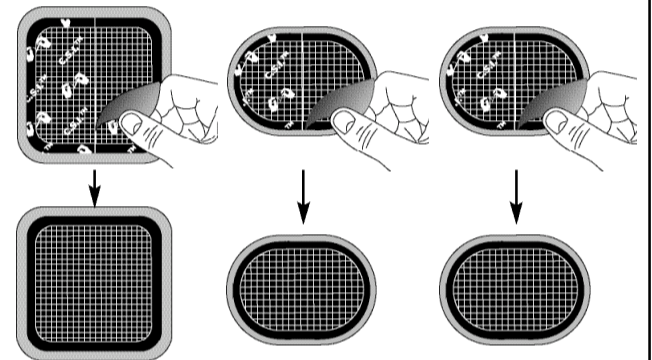

4 Position Pads

Placez les électrodes
Elektroden anlegen

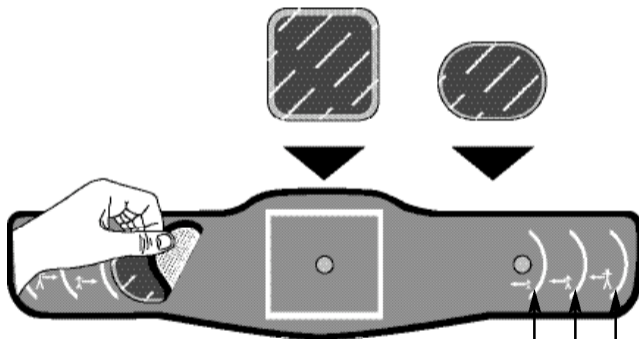

Waist size - Taille - Taillenumfang

24"-30" / 61cm-76cm


30"-38" / 76cm-98cm

38"-47" / 98cm-119cm

Cover the metal studs fully.
Recouvrir complètement les plots métalliques.
Metallknöpfe vollständig abdecken.

5 Peel Off Liners


Retirez les caches
Entfernen Sie den Schutz

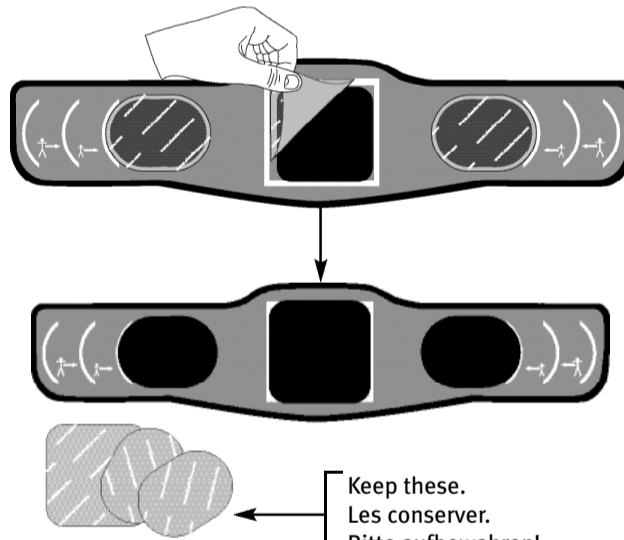

Keep these.
Les conserver.
Bitte aufbewahren!


6 Position Belt

Ajustez la ceinture
Gürtel umlegen

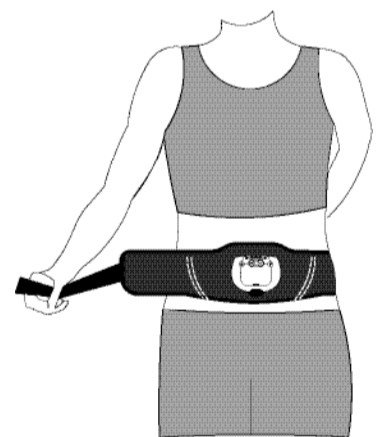

7 Power On

Allumer l'appareil
Gerät anschalten

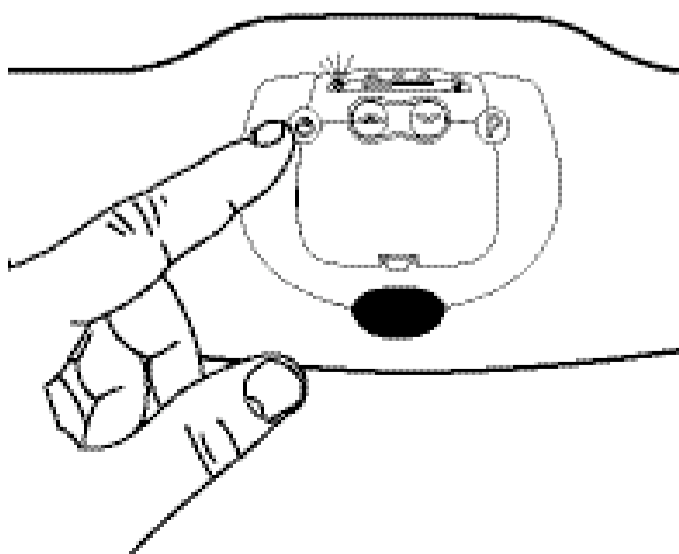

8 Increase Intensity

Augmentez l'intensité
Intensität erhöhen




Press and hold the intensity button and increase the intensity to a level you find comfortable.

Appuyez sur le bouton d'intensité pour augmentez l'intensité jusqu'à un niveau que vous jugez confortable.

Drücken und halten Sie den Intensitätsschalter und erhöhen Sie die Intensität auf ein für Sie angenehmes Maß.

9 Session Over

La séance est terminée.
Sitzungsende

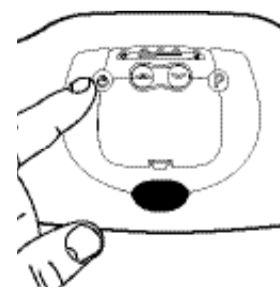

Press and hold the On/off button for two seconds to switch the unit off.

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pendant deux secondes pour éteindre l'appareil.

Drücken und halten Sie den Ein/Aus-Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Kontrollgerät auszuschalten

